



MICROJET

BioSpot[®] Arc 2ヘッド



高精度ナノリットル インクジェット分注機


液にふれるパイプのみ交換

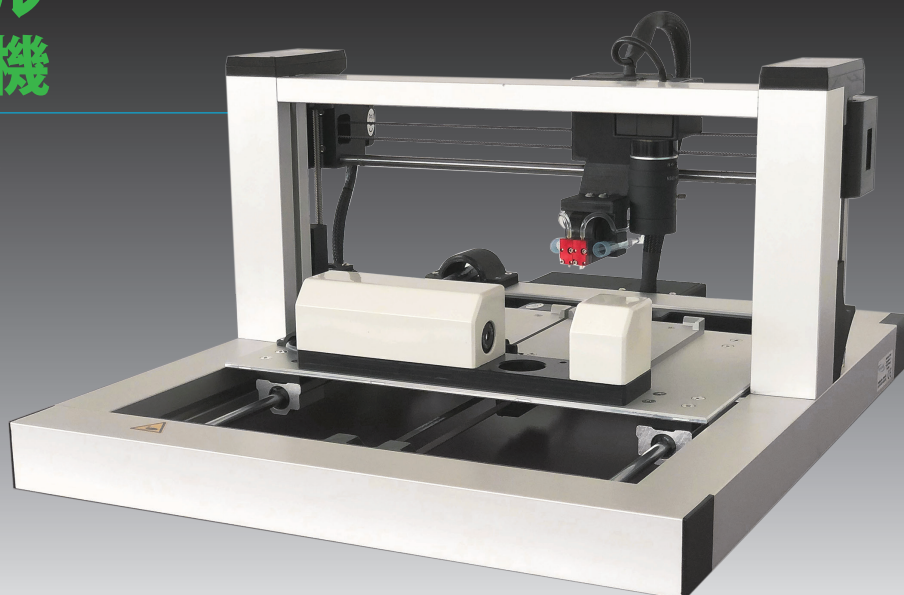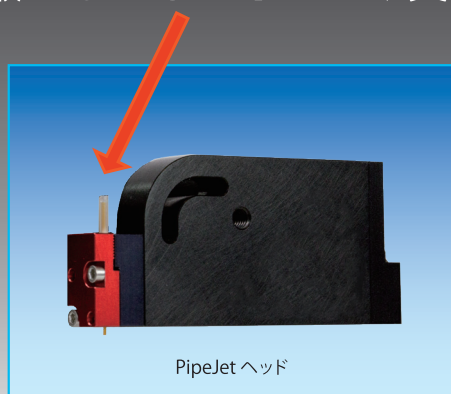

※本装置は BioFluidix社 (独) の製品です

特徴


- 1 洗浄可能なディスポヘッド、低ランニングコスト
- 2 高価な試薬やバイオマテリアルを大幅に節約 (必要液量 $10\mu\text{l}$)
- 3 分注量を自動測定・キャリブレーション
- 4 スポットの位置決め、スポット品質確認用カメラ搭載
- 5 各種基材を搭載できるカスタマイズデッキ

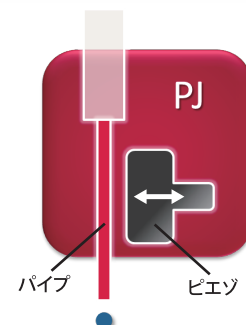

低粘度から
高粘度まで
**0.5~400
mPa·s**

用途例

- 診断・検査チップの作製
- イムノクロマト
- マイクロ流路、Micro-TAS、など微細孔への液注入
- DNA、タンパク、抗体、細胞、試薬の分注・パターンニング

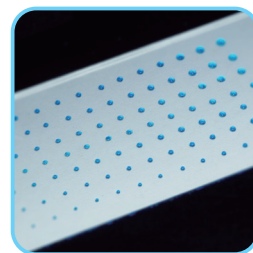

検査チップ作製例

※液種によっては安定吐出できない液があります
※写真と実際の装置は異なる場合があります
※仕様は予告なしに変更することがあります

株式会社 マイクロジェット

長野県塩尻市大門五番町79-2 TEL 0263-51-1734 FAX 0263-51-1735 www.inkjet-bio.com mj-sales@microjet.co.jp